

GEBRAUCHSANWEISUNG zum ELEKTROSCHLAFGERÄT"ELEKTRODORM 1"

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seite:</u>
1. Einleitung	2
2. Mechanisch - elektrischer Aufbau	2
21 Prinzipielle Funktionsweise	2
22 Mechanischer Aufbau	4
3. Die Elektroden	5
31 Aufbau der Elektroden	5
4. Bedienung des Gerätes	7
5. Überprüfung des Gerätes	8
6. Technische Daten	9
7. Indikationen für den Elektroheilschlaf	9
8. Elektroschlaftherapie	10
81 Allgemeine Richtlinien	10
82 Durchführung der Einzelbehandlung	10
9. Schaltplan	12
10. Literatur	13

zu beziehen durch:

J. ODELG A Ärztlich-technische Industrie Gesellschaft m.b.H. WIEN XVI, Kopfstraße 61
--

## 1. Einleitung

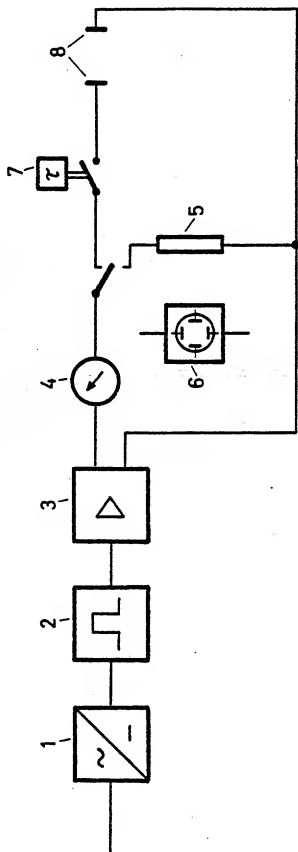
Die Tatsache, daß der Schlaf eine heilsame Wirkung bei verschiedenen krankhaften Zuständen besitzt, wurde von der Menschheit bereits vor der Zeit Christi Geburt erkannt. Daß der Schlafzustand auch im Altertum bei einigen Völkern bewußt, also mit dem Ziele einen Heilerfolg zu erreichen, angestrebt und auch erreicht wurde, beweist uns eine 375 vor unserer Zeitrechnung hergestellte Votivtafel, auf der über einen erfolgreichen "Tempelschlaf" berichtet wird und die 2000 Jahre später aus dem Schutt von Epidauros ausgegraben wurde. Der Tempelschlaf, herbeigeführt durch einen "Schlaftrunk", hat diesem Bericht zufolge heilende Wirkung gehabt.

Das Bestreben, Schlaf auf künstlichem Wege zu erzeugen, erhielt durch die beginnende Pharmakologie im letzten, besonders aber in unserem Jahrhundert einen gewaltigen Auftrieb und der pharmakologische Heilschlaf wurde eine Therapieform. Bald jedoch erkannte man, daß der pharmakologisch herbeigeführte Schlaf nicht immer so harmlos ist, wie ursprünglich angenommen wurde. Daher war es wichtig, eine Schlaftherapie auszuarbeiten, bei der dem Organismus keine Schlafmittel zugeführt werden brauchen und welche den Vorzug völliger Gefährlosigkeit besitzt. Diese Bestrebungen führten neben anderen am Markt erschienenen Geräten zur Entwicklung des modernen Gerätes Elektrodorm 1.

## 2. Mechanisch - elektrischer Aufbau


2.1 Prinzipielle Funktionsweise (siehe Blockschaltbild und Schaltbild im Anhang)

Das Elektroschlafgerät Elektrodorm 1 ist volltransistorisiert und besitzt praktisch unbegrenzte Lebensdauer. Durch Verwenden von Transistoren und einer gedruckten Schaltung konnte der elektronische Teil sehr klein und stoßsicher ausgeführt werden. Die Schaltung ist kurzschlußsicher ausgeführt, so daß die Elektroden auch bei max. Ausgangsspannung zusammengeführt werden können. Elektrodorm 1 arbeitet mit Kleinspannung und ist daher vollkommen ungefährlich. Die Hochspannung von 220 V ist durch eine Schutzwicklung vom Sekundärkreis streng isoliert. Die im Netzteil erzeugte Gleichspannung von ca. 40 V speist den nachgeschalteten Multivibrator mit den Transistoren T<sub>1</sub>,



$T_2$  und  $T_3$ . Dieser astabile Multivibrator erzeugt Rechteckimpulse mit einstellbarer Frequenz durch Verstellen des Potentiometers  $R_7$  (Drehknopf mit schwarzem Einsatz) und einstellbarer Impulsdauer durch Schalten des Drehschalters  $S_2$  (Drehknopf mit grünen Einsatz).

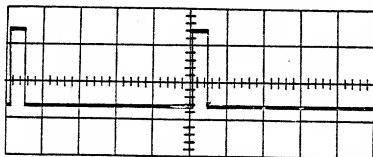Im anschließenden Verstärker 3 werden diese Impulse einer Gleichspannung überlagert und mit Hilfe des Potentiometers  $R_8$  (Drehknopf mit rotem Einsatz) kontinuierlich verstärkt (siehe Bild).



Leerlaufspannung


Der Ausgang des Verstärkers führt über ein skalenbeleuchtetes Meßgerät 4 auf ein Drucktastenaggregat, mit dem er wahlweise auf den eingebauten Prüf Widerstand  $R_{12}$  durch Betätigen der grünen Taste oder die Kopfelektrode 6 nach Betätigen der roten Taste geschaltet wird. Zur Beobachtung der Impulskombination ist ein Oszillographenanschluß vorgesehen. Die Oszillographenbuchse ist nicht angeschlossen, da die Forderung nach den ÖVE-Vorschriften - Erdfreiheit des Patienten - dadurch unter Umständen nicht mehr erfüllt wäre. Ein Anschluß kann auf eigene Verantwortung leicht durchgeführt werden.

Im Ausgang zwischen dem Tastenschalter und der Elektrodenbuchse befindet sich eine Schaltuhr, mit der eine Behandlungsdauer bis zu 2 Stunden eingestellt werden kann. Es ist zu beachten, daß an der Elektrodenbuchse erst dann eine Spannung anliegt, wenn mit der Schaltuhr eine Behandlungszeit vorgewählt wurde.

## 22 Mechanischer Aufbau

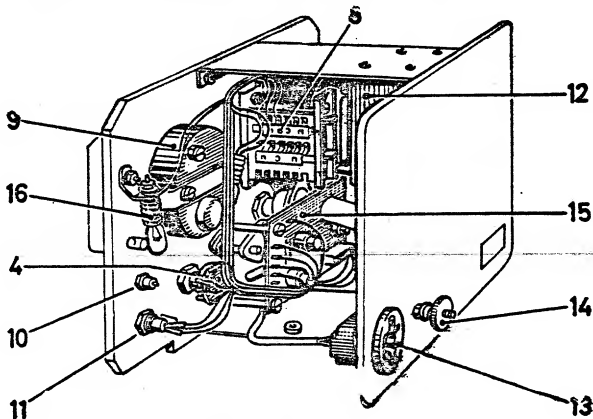Die formschöne Gehäuse-Konstruktion erfüllt sämtliche Forderungen der Praxis. Das Gerät besitzt einen Aufstellbügel, wodurch es sowohl aufstehend als auch auf sitzender Position leicht bedient und das Meßgerät einwandfrei abgelesen werden kann. Durch einfaches Hochklappen des Aufstellbügels verwandelt sich dieser in einen bequemen Tragriff. Das Elektrodorm 1 ist als Einschub aufgebaut und läßt sich nach Lösen von zwei Schrauben an der Unterseite des Gehäuses aus diesem herausziehen.

Das Gerät ist sehr übersichtlich und einfach aufgebaut. An der Frontplatte sind sämtliche Bauelemente außer dem Transformator 12 und der Gerätesteckdose 13 direkt montiert. Durch diesen Aufbau konnten sämtliche Bedienelemente samt skalenbeleuchtetem Meßgerät 9 sehr übersichtlich an der Frontplatte angebracht werden. An der Innenseite der Frontplatte sind zu beiden Seiten des Meßgerätes Lämpchen 16 angebracht, die über ins Meßgerät eingebaute Plexiglasstäbchen für eine schwache Beleuchtung der Skala sorgen. Über vier Distanzhalter ist die gedruckte Schaltung 15, auf der sowohl das Netzgerät als auch der Multivibrator und der Verstärker aufgebaut sind,



ebenfalls an der Frontplatte befestigt. Sämtliche Bauelemente sind leicht zugänglich, so daß eine Überprüfung in einfacher Weise durchgeführt werden kann. Die Rückwand des Gerätes enthält die Schnuko-Gerätesteckdose 13, über die das Gerät normal geerdet wird. Das Gerät kann auch über die an der Rückwand befestigte Erdungsschraube 14 geerdet werden.

### 3. Elektroden

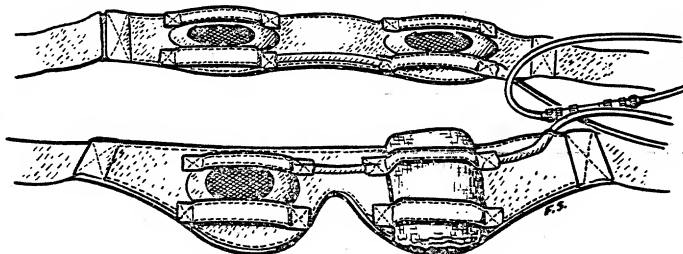
#### 3.1 Aufbau der Elektroden

Die Elektroden bestehen aus engmaschigen Kupfernetzen, die mit 24-karätigem Gold vergoldet sind. Sie sind mit Schaumstoffpolster unterlegt und in einem

Gummiband gelagert, so daß sie sich an den Anlegestellen, an den Augen und im Nacken des Patienten (siehe Bild), bestens anschmiegen und ihm kein unangenehmes Druckgefühl verursachen.

Feuchte Gazestreifen können durch die dafür vorgesehenen Laschen über die Elektroden gezogen werden, um erstens durch Befeuchten mit Leitungswasser einen guten Übergangswiderstand zu erzielen und zweitens dem Patienten das Gefühl einer hygienischen und ungefährlichen Elektrode zu verschaffen.

Als Befestigungsbänder wurden sogenannte Klettenbänder verwendet. Durch die Kreuzung derselben über den Ohren wird der Winkel zwischen den Bändern fixiert, so daß auch bei häufiger Kopfdrehung während der Behandlung die Elektroden in ihrer Stellung bleiben. Ein Verschieben oder ein Abrutschen der Elektroden ist bei dieser Befestigungsart praktisch nicht möglich.




Über ein 2,5 m langes und bis zur Abzweigung zu den Elektrodenpaaren abgeschirmtes Kabel werden die Elektroden mit einer selbstverriegelnden Präzisions-Steckverbindung mit dem Schlafergerät verbunden. Durch die Abschirmung wurde trotz des zarten Kabels eine hohe mechanische Festigkeit erzielt, wodurch das Kabel auch einer robusteren Behandlung standhält.

Um das Anlegen der Elektroden am Kopf des Patienten zu vereinfachen und um die Reinigung der Elektroden zu erleichtern, wurde eine leicht lösbare Kupplung unmittelbar vor der Nackenelektrode vorgesehen.

#### 4. Bedienung des Gerätes

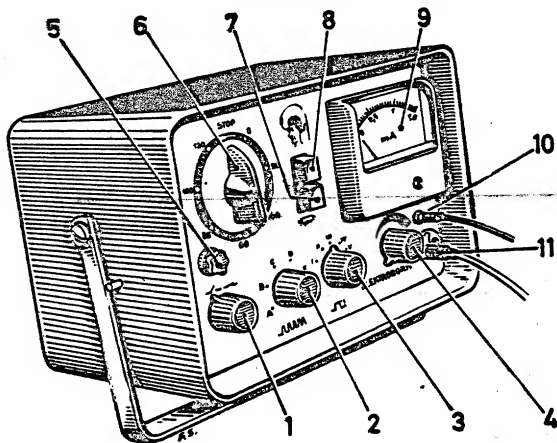Die Bedienung des Gerätes ist von größter Einfachheit. Die Beschriftung wurde mit einfachen Symbolen durchgeführt, damit das Gerät erstens sehr übersichtlich ist und zweitens international verwendet werden kann. Für die Drehknöpfe und die Drucktasten wurden verschiedene Farben verwendet, um eine Verwechslung in der Bedienung zu vermeiden.




- 1 Netzschalter
- 2 Frequenzregler
- 3 Wahlschalter für Impulsdauer
- 4 Ausgangsregler
- 5 Netzsicherung
- 6 Schaltuhr

- 7 Prüftaste
- 8 Patiententaste
- 9 Strommeßgerät (skalenbeleuchtet)
- 10 Oszillographenanschluß
- 11 Elektrodenanschluß

#### 4. Bedienung des Gerätes

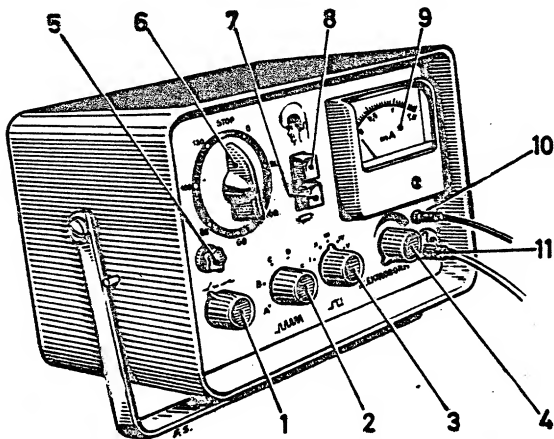Die Bedienung des Gerätes ist von größter Einfachheit. Die Beschriftung wurde mit einfachen Symbolen durchgeführt, damit das Gerät erstens sehr übersichtlich ist und zweitens international verwendet werden kann. Für die Drehknöpfe und die Drucktasten wurden verschiedene Farben verwendet, um eine Verwechslung in der Bedienung zu vermeiden.




- 1 Netzschalter
- 2 Frequenzregler
- 3 Wahlschalter für Impulsdauer
- 4 Ausgangsregler
- 5 Netzsicherung
- 6 Schaltuhr

- 7 Prüftaste
- 8 Patiententaste
- 9 Strommeßgerät (skalenbeleuchtet)
- 10 Oszillographenanschluß
- 11 Elektrodenanschluß



$T_2$  und  $T_3$ . Dieser astabile Multivibrator erzeugt Rechteckimpulse mit einstellbarer Frequenz durch Verstellen des Potentiometers  $R_3$  (Drehknopf mit schwarzem Einsatz) und einstellbarer Impulsdauer durch Schalten des Drehschalters  $S_2$  (Drehknopf mit grünem Einsatz).

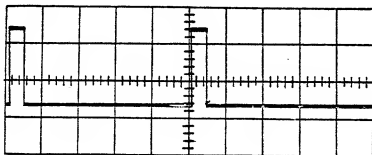Im anschließenden Verstärker 3 werden diese Impulse einer Gleichspannung überlagert und mit Hilfe des Potentiometers  $R_8$  (Drehknopf mit rotem Einsatz) kontinuierlich verstärkt (siehe Bild).



Leerlaufspannung


Der Ausgang des Verstärkers führt über ein skalensoleuchtetes Meßgerät 4 auf ein Drucktastenaggregat, mit dem er wahlweise auf den eingebauten Prüf Widerstand  $R_{12}$  durch Betätigen der grünen Taste oder die Kopfelektrode 6 nach Betätigen der roten Taste geschaltet wird. Zur Beobachtung der Impulskombination ist ein Oszillographenanschluß vorgesehen. Die Oszillographenbuchse ist nicht angeschlossen, da die Forderung nach den ÜVE-Vorschriften - Erdfreiheit des Patienten - dadurch unter Umständen nicht mehr erfüllt wäre. Ein Anschluß kann auf eigene Verantwortung leicht durchgeführt werden.

Im Ausgang zwischen dem Tastenschalter und der Elektrodenbuchse befindet sich eine Schaltuhr, mit der eine Behandlungsdauer bis zu 2 Stunden eingestellt werden kann. Es ist zu beachten, daß an der Elektrodenbuchse erst dann eine Spannung anliegt, wenn mit der Schaltuhr eine Behandlungszeit vorgewählt wurde.

## 22 Mechanischer Aufbau

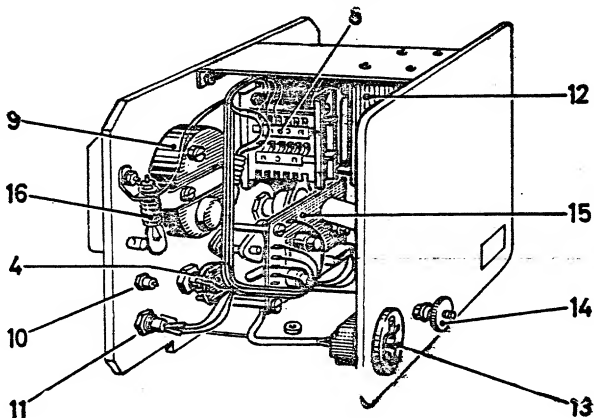Die formschöne Gehäuse-Konstruktion erfüllt sämtliche Forderungen der Praxis. Das Gerät besitzt einen Aufstellbügel, wodurch es sowohl aus stehender als auch aus sitzender Position leicht bedient und das Meßgerät einwandfrei abgelesen werden kann. Durch einfaches Hochklappen des Aufstellbügels verwandelt sich dieser in einen bequemen Traggrieff. Das Elektrodorm 1 ist als Einschub aufgebaut und läßt sich nach Lösen von zwei Schrauben an der Unterseite des Gehäuses aus diesem herausziehen.

Das Gerät ist sehr übersichtlich und einfach aufgebaut. An der Frontplatte sind sämtliche Bauelemente außer dem Transformator 12 und der Geräteteckdose 13 direkt montiert. Durch diesen Aufbau konnten sämtliche Bedienelemente samt skalenbeleuchtetem Meßgerät 9 sehr übersichtlich an der Frontplatte angebracht werden. An der Innenseite der Frontplatte sind zu beiden Seiten des Meßgerätes Lämpchen 16 angebracht, die über ins Meßgerät eingebaute Plexiglasstäbchen für eine schwache Beleuchtung der Skala sorgen. Über vier Distanzhalter ist die gedruckte Schaltung 15, auf der sowohl das Netzgerät als auch der Multivibrator und der Verstärker aufgebaut sind,



ebenfalls an der Frontplatte befestigt. Sämtliche Bauelemente sind leicht zugänglich, so daß eine Überprüfung in einfacher Weise durchgeführt werden kann. Die Rückwand des Gerätes enthält die Schuko-Geräteteckdose 13, über die das Gerät normal geerdet wird. Das Gerät kann auch über die an der Rückwand befestigte Erdungsschraube 14 geerdet werden.

### 3. Elektroden

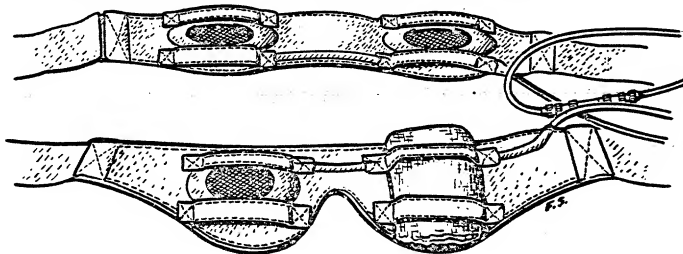
#### 31 Aufbau der Elektroden

Die Elektroden bestehen aus engmaschigen Kupfernetzen, die mit 24-karätigem Gold vergoldet sind. Sie sind mit Schaumstoffpolster unterlegt und in einem

Gummiband gelagert, so daß sie sich an den Anlegestellen, an den Augen und im Nacken des Patienten (siehe Bild), bestens anschmiegen und ihm kein unangenehmes Druckgefühl verursachen.


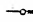


Feuchte Gazestreifen können durch die dafür vorgesehenen Laschen über die Elektroden gezogen werden, um erstens durch Befeuchten mit Leitungswasser einen guten Übergangswiderstand zu erzielen und zweitens dem Patienten das Gefühl einer hygienischen und ungefährlichen Elektrode zu verschaffen.

Als Befestigungsbänder wurden sogenannte Klettenbänder verwendet. Durch die Kreuzung derselben über den Ohren wird der Winkel zwischen den Bändern fixiert, so daß auch bei häufiger Kopfdrehung während der Behandlung die Elektroden in ihrer Stellung bleiben. Ein Verschieben oder ein Abrutschen der Elektroden ist bei dieser Befestigungsart praktisch nicht möglich.



Über ein 2,5 m langes und bis zur Abzweigung zu den Elektrodenpaaren abgeschirmtes Kabel werden die Elektroden mit einer selbstverriegelnden Präzisions-Steckverbindung mit dem Schlafergerät verbunden. Durch die Abschirmung wurde trotz des zarten Kabels eine hohe mechanische Festigkeit erzielt, wodurch das Kabel auch einer robusteren Behandlung standhält.

Um das Anlegen der Elektroden am Kopf des Patienten zu vereinfachen und um die Reinigung der Elektroden zu erleichtern, wurde eine leicht lösbare Kupplung unmittelbar vor der Nackenelektrode vorgesehen.

Das Gerät wird mit Hilfe des Netzschalters 1 (Drehknopf mit gelbem Einsatz) eingeschaltet. Der Schaltzustand des Gerätes wird außer durch die Bezeichnung am Drehknopf  = aus,  = ein, auch durch die Beleuchtung im Meßgerät, die es außerdem gestattet den Belastungsstrom im verdunkelten Raum abzulesen, angezeigt. Mit Hilfe der Drehknöpfe 2 (mit schwarzem Einsatz) und 3 (mit grünem Einsatz) kann die Frequenz  zwischen 30 und 230 Hz kontinuierlich und die Impulsdauer  in Stufen von 0,4 bis 1,2 ms nach folgender Tabelle eingestellt werden. So beträgt

die Frequenz bei einer  
Potentiometerstellung

auf A	36 Hz
B	40 Hz
C	50 Hz
D	62 Hz
E	100 Hz
F	220 Hz

die Impulsdauer bei einer  
Schalterstellung

auf I	0,4 ms
II	0,5 ms
III	0,8 ms
IV	1,0 ms
V	1,4 ms

Mit Hilfe des Ausgangsreglers 4 (Drehknopf mit rotem Einsatz) kann der Belastungsstrom kontinuierlich verändert werden. Vor jeder Verwendung des Gerätes ist darauf zu achten, daß der Ausgangsregler am linken Anschlag steht.

Nach Anlegen der Elektroden und Anschließen des Kabels an das Schlafgerät über die Buchse 11 und Vorwählen der gewünschten Behandlungszeit wird die Patiententaste 8 gedrückt und der Ausgang des Gerätes auf den Patienten geschaltet. Anschließend wird mit dem Ausgangsregler langsam hochgeregelt bis der Patient ein leichtes "Prickeln" an den Augen- oder den Nackenelektroden angibt. Nach einer kleinen Gewöhnungspause, in der das Prickeln vergeht, wird eine weitere Steigerung um 0,1 bis 0,2 mA vorgenommen und sodann am Gerät nichts mehr verändert.

##### 5. Überprüfung des Gerätes

Durch Betätigung der Prüftaste wird der Ausgang auf einen eingebauten Prüf Widerstand mit 4 k $\Omega$ , der dem normalen Kopfwiderstand entspricht, geschaltet. Bei einer eingestellten Frequenz von 100 Hz und einer Impulsdauer von 1 ms ergibt sich bei der Endstellung des Ausgangsreglers ein Strom von ca. 1,5 mA. Da die Schaltung kurzschlußsicher ausgeführt

wurde, können der Patientenausgang, das Elektrodenkabel und die Elektroden durch Zusammenlegen der Elektrodenpaare leicht überprüft werden. Bei einwandfreiem Ausgang, einwandfreiem Elektrodenkabel und einwandfreien Elektroden erhält man bei kontinuierlicher Verstellung des Ausgangsreglers eine gleichmäßig ansteigende Anzeige des Ausgangsstromes am Meßgerät.

## 6. Technische Daten

Speisespannung	: 220 V 50/60 Hz, durch Umlöten auch 110 V
Leistungsaufnahme	: 5 VA
Sicherung	: 50 mA

### Ausgang

Frequenzbereich	: 30 ... 230 Hz kontinuierlich regelbar
Rechteckimpulsdauer	: 0,4 ... 1,2 ms stufenweise einstellbar
Leerlaufspannung	: Scheitelspannung 32 V Impulsspannung 20 V Gleichspannung 12 V

Ausgangsspannung bei einem Belastungswiderstand von 4 k $\Omega$	: Scheitelspannung 34 V Impulsspannung 25 V Gleichspannung 9 V
--	--

Belastungsstrom bei einem Belastungswiderstand von 4 $\Omega$ , Frequenz 100 Hz, Impulsdauer 1 ms : I = 1,4 mA

Abmaße des Gerätes	: 270 x 155 x 136 mm
Gewicht	: 3,5 kp

Zubehör	: 2 Elektrodengarnituren mit 2,5 m, zweipolig abgeschirmtem Kabel 1 Oszillographenkabel mit 1 m, einpolig abgeschirmtem Kabel 1 Netzkabel für Schukoanschluß, 2 m
---------	---

Elektrodorm wurde nach den OeVE-Vorschriften geprüft.

## 7. Indikationen für den Elektroheilschlaf

Auf Grund der zur Verfügung stehenden Literatur, sowie der mit dem Elektrodorm 1 gemachten Erfahrungen (Wageneder) ist diese Therapie bei folgenden Erkrankungen von nachstehend angeführten Ärzten mit Erfolg angewandt worden:

Endarteritis obliterans	:	ROITENBURD, WAGENEDER
Neurosen	:	BANSCHTSCHIKOW, BOLOTOWA
Bronchialasthma	:	BULATOW
Schlafstörungen	:	KOEPPEN, WAGENEDER
Psychopathien	:	KOWALEWA, KOEPPEN, RUSAKOW
Kopfschmerz	:	KOEPPEN, WAGENEDER
Schwangerschaftstoxikose	:	PASTERNAK
Hypertonie	:	SERGEJEV
Juckende Dermatosen	:	KONOWALOWA, SCHACHNOWSKAJA

## 8. Elektroschlaftherapie

### 81 Allgemeine Richtlinien

Bei den oben angeführten Indikationen ist eine Behandlungsdauer von 3-4 Wochen, das heißt es sind 15-20 Einzelbehandlungen erforderlich. Die Einzelbehandlungen erfolgen täglich und sollen keine längere Unterbrechung als höchstens einen Tag erfahren.

Die Behandlung ist ohne Gefahr für den Patienten auch ambulant durchführbar:

Die Einzelbehandlung wird mit ca. 1/2 Stunde Stromeinwirkung begonnen und steigert sich in drei bis vier Tagen auf 1 1/2 - 2 Stunden (einschleichen), sie wird dementsprechend gegen Ende der Gesamtbehandlung wieder auf die Ausgangs - Behandlungsdauer reduziert.

Nach den mit dem Elektrodorm 1 gemachten Erfahrungen wird eine Impuls-Folgefrequenz von 100 Hz (Frequenzregler 2 auf Potentiometerstellung E) und eine Impulsdauer von 1 ms (Wahlschalter für Impulsdauer 3 auf Schalterstellung IV) empfohlen.

### 82 Durchführung der Einzelbehandlung

Sobald der Patient im Bett liegt, wird er mit einer leichten Decke zugedeckt, die Elektroden werden nach Einführen feuchter Gazestreifen in die dazu vorgesehenen Laschen, angelegt und die Sicherheitskupplung der Augenelektrode wird mit der Gegenkupplung am

Patientenanschlußkabel verbunden. Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, bei verschiedenen Patienten, die sehr lärmempfindlich sind, vor Behandlungsbeginn die Ohren mit einem Geräuschschützer, z.B. "Oropax", abzudichten, um damit äußere Einflüsse akustischer Art fernzuhalten. Nach Einstellen der Zeituhr wird mit der Patiententaste der Strom eingeschaltet und mit dem Ausgangsregler 4 (Drehknopf mit roten Einsatz) die Stromstärke gesteigert bis der Patient ein leichtes "Prickeln" unter den Elektrodenflächen angibt. Nach einer kurzen Gewöhnungspause wird eine weitere Steigerung von 0,1 bis 0,2 mA vorgenommen. Während der Behandlung werden nach Möglichkeit sämtliche Reize vom Patienten ferngehalten, während eine Überwachung nicht unbedingt erforderlich ist. Messungen jeglicher Art für wissenschaftliche Untersuchungen erfolgen am besten mit Meßgeräten, deren Meßfühler bereits vorher angelegt wurden. Die Pulszählung wird bei den meisten Patienten nicht wahrgenommen und dieser Reiz im allgemeinen ohne Störung des Schalfzustandes toleriert. Eine geringe Abnahme der Werte von RR, Puls- und Atemfrequenz sind normal.

Nach Ablauf der Zeituhr wird der Patient automatisch vom Strom abgeschaltet. Die Elektroden verbleiben in ihrer Lage. Bei entsprechender Einrichtung (zwei Liegestellen für ein Gerät) kann nunmehr der zweite Patient angeschlossen werden, wobei der Nachschlaf des ersten Patienten, welcher bis zu 20 Minuten dauern kann, nicht unterbrochen wird.

BANSCHTSCHIKOW W.M. u. E.I.  
LEBEDINSKAJA

: Bedeutung des Elektroschlafes bei der Behandlung von Neurosen, traumatischen Affektionen und Gefäßkrankungen des Gehirns in Verbindung mit dem Agrypnie-Syndrom.

Arbeiten des I. Moskauer Med. Institutes, 25, 385 - 398 (1963)

BOLOTOWA Z.N. u. G.S.  
KUDRJAWZEWA

: Wirkung des Elektroschlafes auf die Dynamik der unbedingten Gefäßreflexe bei der Behandlung von Neurosen.

Das Gehirn und die Reflexsteuerung  
Kiew, 1963, S. 93 - 95

BULATOW P.K., P.I. BUL u. L.A.  
TSCHETWERIKOWA

: Zur Frage der Behandlung von Bronchialasthma mittels Elektroschlaf.

Bronchialasthma, 3. Ausgabe Leningrad, 1962, S. 246 - 257

DIEMATH H.E., F.M. WAGENEDER,  
St. SCHUY u. R. GENSER

: Stromfelder im Gehirn des Menschen während des Elektroschlafes..

Neurochirurgia (im Druck)

GILJAROWSKI W.A., LIWENZEN N.M.,  
Ju. Je. SEGAL u. S.A. KIRILLOWA

: Elektroschlaf

Staatsverlag für med. Literatur,  
Medgis 1953 - Moskau.

HEPPNER F.

: Der Elektroschlaf und seine physiologischen Grundlagen.

"Progress in Brain Research"  
(im Druck)

KOEPPEN S. u. R. EICHLER

: Untersuchungen über Elektroheilschlaf in der inneren Medizin.

Medizinische Klinik, S. 1492 - 1495,  
50. Jg. (1963) Nr. 36

KOEPPEN S. u. R. EICHLER

: Der Elektroheilschlaf

Elektromedizin Band 5/1960, Nr. 1  
26 - 35

KOWALEWA E. Ja.

: Über die Wirksamkeit des Elektroschlafes in der Psychiatrischen Klinik.

Arbeiten des I. Mosk. Med. Inst.  
Band 25, 1963, 407 - 411



PASTERNAK M.D.

: Anwendung des Impulsstromes bei der Behandlung von Schwangerschaftstoxikosen.

Geburtshilfe und Gynäkologie, 1964, No. I, Seite 69 - 74

ROITENBURD S.

: Erfahrungen in der Behandlung der obliterierenden Endarteritis mit dem Apparat "Elektrosen".

Neue chirurgische App. u. Instrumente, 2, 77 - 82 (1958)

RUSAKOW W.I.

: Elektroschlaf in den Psychoneurologischen Gesundheitsforschungsstellen.

Gesundheitswesen des Kasachstans, 1961, No. 2, Seite 25 - 28

SCHACHNOWSKAJA E.I.

: Anwendung des Impulsstromes niedriger Frequenz bei der komplexen Therapie von Phantomschmerzen.

Fragen der Balneologie, Psychotherapie und Heilgymnastik, 1960, No. 2, Seite 109 - 113.

SEMANDINI G. u. M. TSCHICALOFF

: Der Elektroschlaf

Medicine et Hygiene, Genf, Nr. 356, Notes Thérapeutiques

SERGEJEV G.

: Elektroschlaf heilt Hypertonie

Die Wissenschaft und das Leben, 1963, No. 9, Seite 48 - 50

WAGENER F.M. u. St. SCHUY

: Beitrag zur Entwicklung von Geräten auf dem Gebiet des Elektroschlafes in der Elektronarkose.

Zentralblatt f. Chirurgie (im Druck)

WAGENER F.M.

: Methodische und klinische Erfahrungen der Elektroheilschlafbehandlung "Progress in Brain Research" (im Druck)

WAGENER F.M., F.L. JENKNER u. H. HAFNER

: Zur Veränderung der cerebralen Hämodynamik während des Elektroschlafes.

Deutsches Medizinisches Journal (im Druck)

WAGENER F.M. u. H. HAFNER

: Elektroheilschlaf (eine neue Therapieform)

Der Anaesthesist (im Druck)

WAGENER F.M., St. SCHUY u. R. GENSER

: Potentialmessungen im Hundehirn während der Durchflutung mit Impulsströmen.

Der Anaesthesist (im Druck)

# heil schlafzentrum



designer arch. dipl.-Ing. emo meiser, graz

AUS DER CHIRURGISCHEN UNIVERSITÄTSKLINIK GRAZ, AUSTRIA (VORSTAND: PROF. DR. F. SPATH)  
THERAPIE- UND FORSCHUNGSZENTRUM FÜR ELEKTROSCHLAF UND ELEKTRONARKE  
NACH DR. FRANZ WAGENER

FROM THE DEPARTMENT OF SURGERY, THE UNIVERSITY OF GRAZ, AUSTRIA, SCHOOL OF MEDICINE (CHIEF OF DEPT.: PROF. DR. F. SPATH)  
THERAPEUTIC AND RESEARCH CENTER FOR ELECTRIC SLEEP AND ELECTRICAL ANESTHESIA  
BY DR. FRANZ WAGENER

ist die heilsame Wirkung des Schlafes bei verschiedenen krankhaften Zuständen bekannt. Die Tatsache wurde von der Menschheit bereits im Altertum erkannt. Schon damals wurde Schlafmittel aus dem Saft von Pflanzen gewonnen. Dies hat seit dem Jahr 375 v. Chr. hergestellte Valerianen, auf dem Gebiet der "Templetschlaf" (Templetschlaf) beruht, und die 2000 Jahre später aus dem Saft von Epidaurus gewonnen wurde. Der Templetschlaf, herbeigeführt durch einen Schlaftrunk, hat diesem Bericht zufolge heilsame Wirkung gelohnt.

Die Schlaflosigkeit stellte schon seit jeher, besonders aber in der modernen Zeit, ein medizinisches Problem dar. Um sie zu beheben, versuchte man sich verschiedenster Hilfsmittel. Das Bestreben, Schlaf auf künstliche Weise zu erzeugen, erhielt durch die beginnende Pharmakologie im letzten Jahrhundert einen entscheidenden Impuls, einen gewaltigen Auftrieb, und der pharmakologische Heilschlaf wurde eine Therapieform. Bald jedoch erkannte man, daß der pharmakologisch herbeigeführte Schlaf nicht innerlich so harmlos ist, wie dies ursprünglich angenommen wurde.

Daher war es wichtig, eine Schlaftherapie auszuarbeiten, bei der dem Organismus keine Schlafmittel zugeführt werden, sondern nur ein vorübergehender Gefühlszustand herbeigeführt wird. Dies wurde durch die neue Methode der Elektrotherapie erreicht, der nicht nur bei der Behandlung der Schlaflosigkeit, sondern auch bei anderen anderen Erkrankungen, wie z. B. Endarteritis obliterans, Neurosen, Bronchialasthma, Hypertonie, u. s. w., seine Anwendung findet. Um dieses Ziel zu erreichen wurde neben anderen auf dem Markt erschienenen Geräten das "Elektrotröm 1" entwickelt, das dem letzten Stand der technischen und wissenschaftlichen Entwicklung entspricht.

Die ideale Anlage eines Forschungs- und Therapiezentrum in einer weitläufigen Grundfläche liegend. Im Vordergrund ist die Therapiestation zu sehen, und in loser Verbindung damit im Hintergrund der Prototyp der Forschungsstation. Sowohl im Therapiezentrum wie in den Forschungsstationen kann stationäre und ambulante Behandlung durchgeführt werden.

The ideal layout of a research and therapy center located in a large park area. The therapy center in the foreground, and loosely connected with it the research center in the background. In both the therapy and the research center stationary as well as ambulant treatment can be administered.

the curative effect of sleep in various diseases has been known. This fact was recognized by man in the time before Christ. In antiquity some people tried to induce sleep and use it for curative purposes, as is documented by a votive tablet dating to the year 375 B.C. and which tells of a successful "temple sleep". This tablet was dug up 2000 years later from amongst the remains of Epidaurus. According to this report, the temple sleep, induced by a sleeping draught, had a curative effect.

Insomnia has always been - and is more so in modern times - a medical problem. In order to overcome it, the most diverse resources have been called upon. The endeavor to induce sleep artificially received considerable impetus in the past century by the appearance on the scene of pharmacology, but even more so in our century, when pharmacologically induced sleep became a form of therapy. However, very soon it was recognized that this pharmacologically induced sleep was not always quite so harmless as was originally thought.

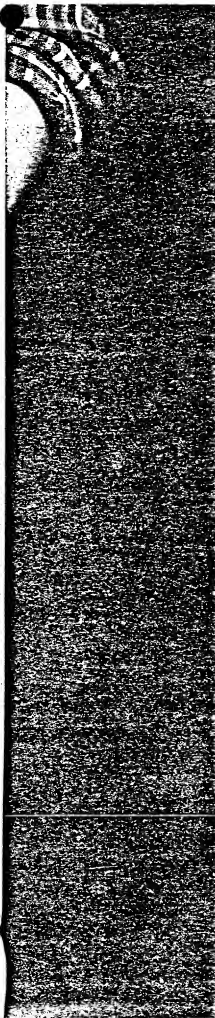
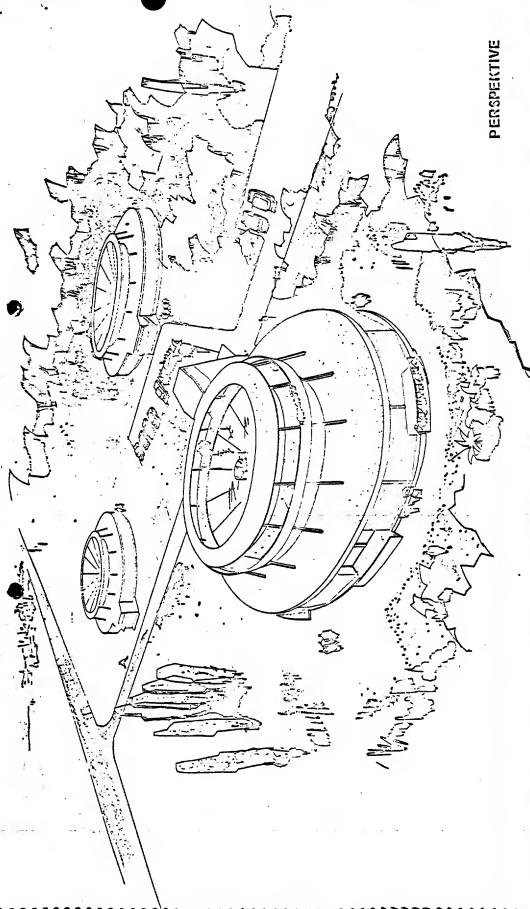
Thus it became expedient to develop a sleep therapy dispensing with sleeping draughts and endowed with the advantage of being absolutely harmless. This has been realized with the new method of electrotherapeutic sleep, which is not only used for the treatment of insomnia but also of many other diseases, like endarteritis obliterans, neuroses, hypertension, etc. Several implements have appeared on the market to achieve this aim, among them the "Electrotröm 1" which corresponds to the latest stand of technical and scientific development.

...was recog-  
nized sleep-  
ing to the  
...was dug  
...his report,

...blem. In  
...Fr. endeavor  
...by the  
...when  
...soon it  
...quite so harm-

...doughts  
...then realized  
...for the treat-  
...was, men-  
...ed on the  
...to the

# PERSPECTIVE





ation and  
... a civil  
... first  
... of  
... and

ment's main  
... by the fol-

AVA

... patient's  
... the  
... one

nd Scholtzland

board

... en

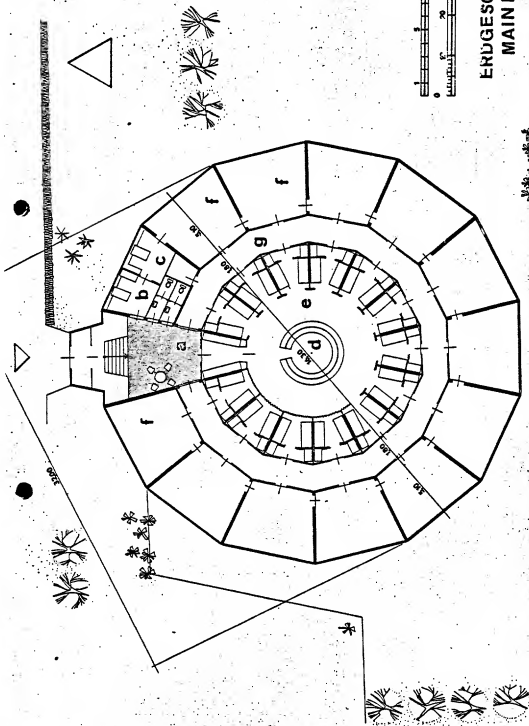
... cells

... orten,

... ries,

... ing

... or



m  
ft

ERDGESCHOSS  
MAIN FLOOR

Die Behandlung ist ohne Gefahr für den Patienten auch unblutig durchführbar, jedoch ist ein besserer Heilerfolg bei stationärer Behandlung zu erwarten. Die Behandlung wird mit ca. 1/2 Stunde Stromeinwirkung begonnen und steigert sich in 3 bis 4 Tagen auf 1 1/2 - 2 Stunden. Sie wird dementsprechend gegen Ende der Gesamtbehandlung wieder auf die Ausgangs-Behandlungsdauer reduziert.

Im Einzelnen wird so vorgegangen:

Sobald der Patient im Bett liegt wird er mit einer leichten Decke zugedeckt, die Elektroden werden nach dem Einfließen feuchter Gasströme in die dazu vorgesehenen Lücken angelegt und durch das Patientenanschlussskabel mit dem Gerät verbunden. Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, bei verschiedenen Patienten, die sehr lärmempfindlich sind, vor Behandlungsbeginn die Ohren mit einem Geräuschelutizer, z.B. "Otopop" abzudecken, um damit äußere Einflüsse akustischer Art fernzuhalten. Nach Einsetzen der Zeiluhr wird der Strom eingeschaltet und die Stromstärke gesteigert, bis der Patient ein leichtes "Prickeln" unter den Elektrodenflächen angibt. Nach einer kurzen Wärmepause wird eine weitere Steigerung von 0,1 mA vorgenommen. Während der Behandlung werden nach Möglichkeit noch den üblichen Reizen von Patienten ferngehalten. Eine Ausnahme bildet die Behandlung von Patienten, die sich während der Behandlung in einem leichten Schlaf befinden. In diesem Fall wird der Patient mit einem Kopfhörer angeschlossen, um die bisher genannten Erfahrungen an den Patienten mit Meßgeräten, deren Meßfühler bereits vorher angelegt wurden. Die Pulszählung wird von den meisten Patienten nicht wahrgenommen und dieser Reiz im allgemeinen ohne Störung des Schlafzustandes toleriert.

Nach Ablauf der Zeiluhr schaltet sich das Gerät automatisch ab. Die Elektroden verbleiben in ihrer Lage. Bei Bedarf kann der Patient in eine Liegestelle für ein Gerät) kommen, in der der Patient angeschlossen werden, wobei der Nachschlaf des ersten Patienten, welcher bis zu 20 Minuten dauern kann, nicht unterbrochen wird.

The treatment can be only injury without any danger for the patient, however, a higher degree of curative effect is achieved with stationary treatment. The treatment is started by letting the current act for about 1/2 hour, which is then increased within 3 or 4 days to 1 1/2 - 2 hours. Towards the end of the entire treatment the duration is gradually reduced again to its initial period.

The single procedure is as follows:

As soon as the patient lies in bed, he is covered with a light blanket. After the insertion of wet stripes of bandage into the lappets provided for this purpose, the electrodes are applied to the patient and connected with the Electroform by means of the connecting cable. Experience has proved it convenient to seal the ears of those patients who are very sensitive to noise, in order to protect them from the acoustic influences. After the clock has been set, the current is intensified until the patient indicates a slight "prickle" under the electrodes. After a warm-up pause, a further increase of 0.1 mA is made. During the treatment all stimuli are kept away from the patient. A constant supervision is not necessary according to the experience gained so far. Any kind of measurements for scientific purposes are best made by connecting beforehand the measuring instruments to the patient. Most patients do not feel the pulse measuring and their sleep is generally not disturbed by this stimulus.

When the time set on the clock runs out, the Electroform turns off automatically. The electrodes remain in their position. With an adequate equipment (2 beds for each Electroform) the second patient can now be connected without interrupting the first patient's after-sleep, which can last up to 20 minutes.

Durch die Anordnung des LD-Kegelschalen-dachstuhls wird die stützenfreie Ausbildung des kettförmigen Behandlungssaumes ermöglicht. Die Beleuchtungsflächen zwischen den Dachflächen über den Dachstuhl können durch Jalousien abgedunkelt werden. Im Zentrum des LD-Dachstuhls ist eine Heizung- und Klimatisierunganlage angeordnet.

The LD roof provides a large circular room for therapy and medical treatment without supports or disturbing columns. One single operator can control all sleeping patients from the central control and switching board (d). The windows between the roof above the research rooms (f) and the LD roof can be darkened by louvers. The utility box with air conditioning and heating device is located in the center of the roof.

LEGENDE: d) Zentraler Beobachtungs- und Schaltstand  
Central control and switchboard

f) Forschungsraum  
Research room

g) Ringförmiger Verbindungsgang  
Circular corridor

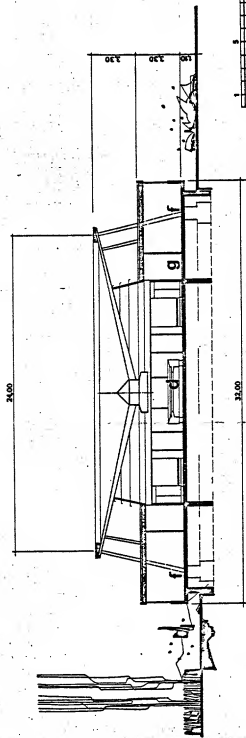


over, a  
a fre-  
a in-  
re tradi-


at the in-  
the elec-  
sons of the  
those pa-  
acoustic  
intensity is  
t. After a  
During  
ation is  
payments  
to the  
in sleep

ically-  
is for  
cuping

Schottland  
red





SCHNITT  
CROSS-SECTION

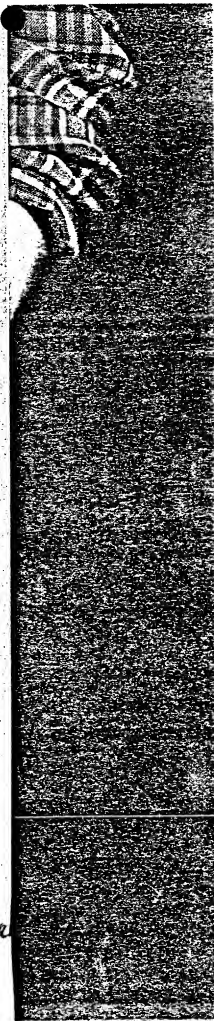


Die Seitenansicht des Gebäudes zeigt den klaren funktionellen Aufbau der Forschungsanlage. Die formale Gestaltung wird weitgehendst von der Grundrisskonzeption bestimmt.

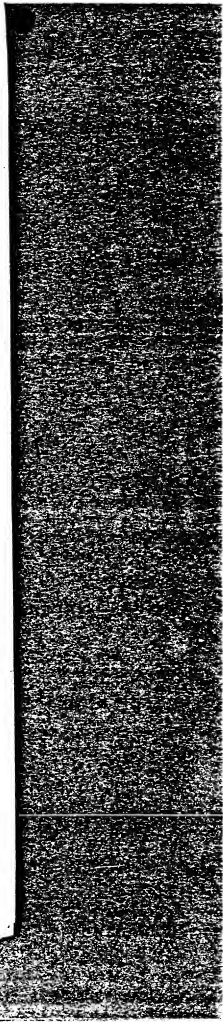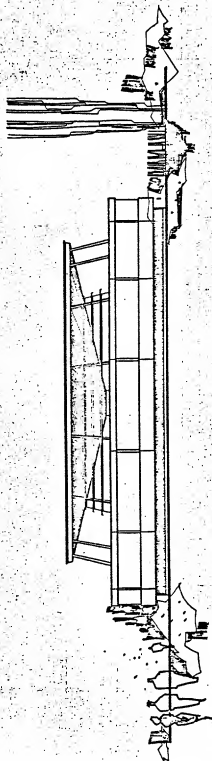The side view of the building shows clearly the functional set-up of the research center. The circular layout governs the whole conception.





SEITENANSICHT  
SIDE VIEW

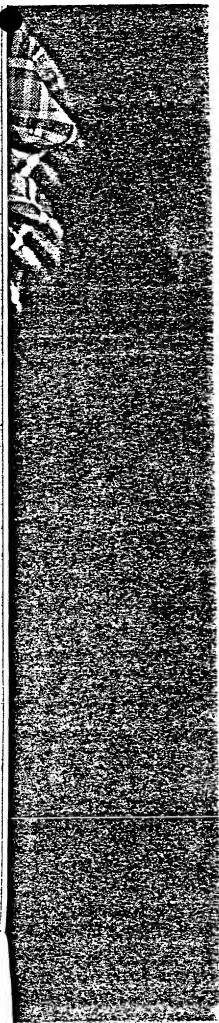


- LEGENDE: 1) Netzschalter  
Power switch
- 2) Frequenzregler  
Frequency control
- 3) Wählschalter für Impulsdauer  
Selector switch for pulse duration
- 4) Ausgangsregler  
Output current adjustmant
- 5) Netzsicherung  
Fuse
- 6) Schallrohr  
Time switch
- 7) Pulfraste  
Test push switch
- 8) Patientenbraste  
Patient's push switch
- 9) Strommeßgerät (skalenbeleuchtet)  
Current-meter (scale illuminated)
- 10) Oszillographenanschluß  
Oscilloscope connection
- 11) Elektrodenanschluß  
Electrode connection

Das Elektroschlafgerät Elektrodorm 1 ist volltransistorisiert und besitzt praktisch unbegrenzte Lebensdauer. Durch Verwenden von Transistoren und einer geschützten Schaltung konnte der elektronische Teil sehr klein und stoßsicher ausgeführt werden. Die Schaltung ist besonders sicher ausgeführt, so daß die Elektroden auch bei maximaler Ausgangsspannung zum Patienten geföhrt werden können. Elektrodorm 1 arbeitet mit Kleinspannung und ist daher vollkommen ungefährlich. Die formschöne Gehäusekonstruktion erfüllt sämtliche Forderungen der Praxis.

Die Bedienung des Gerätes ist von größter Einfachheit. Die Beschreibung wurde mit einfachen Symbolen durchgeführt, damit das Gerät erstens sehr übersichtlich ist und zweitens international verwendet werden kann. Für Drehknöpfe und Drucktasten wurden verschiedene Farben verwendet, um eine Verwechslung in der Bedienung zu vermeiden.

The electro-therapeutic sleep apparatus Elektrodorm 1 is fully equipped with transistors, and its duration of life is unlimited. The use of transistors and pressed wiring permits the manufacture of very small and shockproof electronic parts. The wiring set-up is short-circuit-proof, which makes it possible to connect the electrodes even with a maximum output voltage. Elektrodorm 1 operates with smallest voltage and bears therefore absolutely no danger. The apparatus is layed out very nicely and meets all technical and medical requirements.

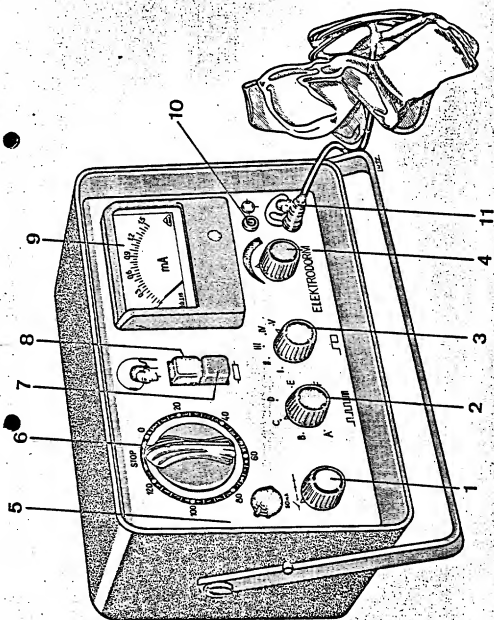Elektrodorm 1 is easy to operate. To facilitate international usage and easy operation, all push buttons are marked with simple symbols and different colors.



Die Elektroden bestehen aus engmaschigen Kupfermetzen, die mit 24-karätigem Gold vergoldet sind. Sie sind mit Schaumstoffpolster unterlegt und in einem Gummiband gelagert, so daß sie sich an den Anlagestellen, an den Augen und im Nacken des Patienten (siehe Bild), bequem anbringen und ihm kein unangenehmes Druckgefühl verursachen.

Feuchte Gazestreifen können durch die dafür vorgesehenen Lücken über die Elektroden gezogen werden, um diese durch Befeuchten mit Leitungswasser einen guten Übergangswiderstand zu erzielen und zweitens den Patienten das Gefühl einer hygienischen und ungelährlichen Elektrode zu verschaffen.

Nach Anlegen der Elektroden und Anschließen des Kabels an das Schaltgerät über die Buchse 11 und Verriegeln der gewünschten Behandlungszeit wird die Patiententaste 8 gedrückt und der Ausgang des Gerätes auf den Patienten geschlossen. Anschließend wird mit dem Ausgangsregler langsam hochreguliert bis der Patient ein leichtes "Prikkeln" unter den Augen- oder den Nackenelektroden angibt. Nach einer kleinen Gewöhnungspause, in der das Prikkeln vergeht, wird eine weitere Steigerung um 0,1 – 0,2 mA vorgenommen und sodann am Gerät nichts mehr verändert.

The electrodes consist of a fine copper wire net, gilt with gold containing 24 carats. They are fixed on a rubber band and cushioned with foam rubber to fit perfectly the patient's eyes and neck without causing disagreeable pressure.

In order to provide a good connexion resistance and to give the patient the impression of a hygienic and harmless electrode, wet stripes of bandage can be inserted into the lapsett of the electrodes provided for this purpose.

After fixing the electrodes to the patient's eyes and neck and connecting the cable with the apparatus at the electrode connexion plug (11), the operator selects the desired duration of treatment and presses the patient's push switch (8), thus starting the treatment. Then the output is slowly increased by means of the output current adjustment, until the patient feels a slight "prickle" under the electrodes. After a short adjustment pause, the prickle disappears and the operator increases the output again to 0.1 – 0.2 mA. No further changes are made until the time control disconnects the apparatus automatically.

# LEGENDE: 4) Ausgangsregler Output current adjustment

8) Patiententaste  
Patient's push switch

9) Strommeßgerät (Skalenbeleuchtung)  
Current-meter (scale illuminated)

10) Oszillographeneinschluß  
Oscilloscope connexion

11) Elektrodenanschluß  
Electrode connexion

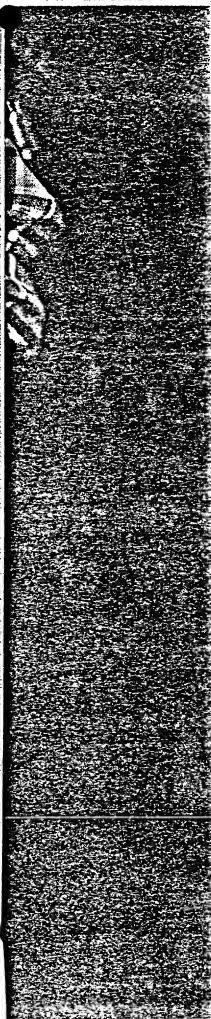
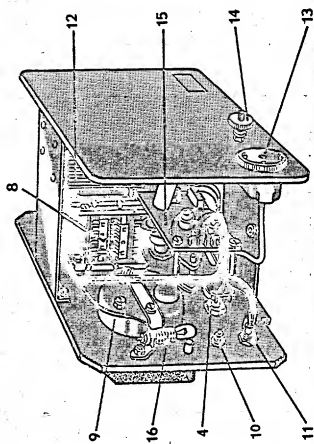
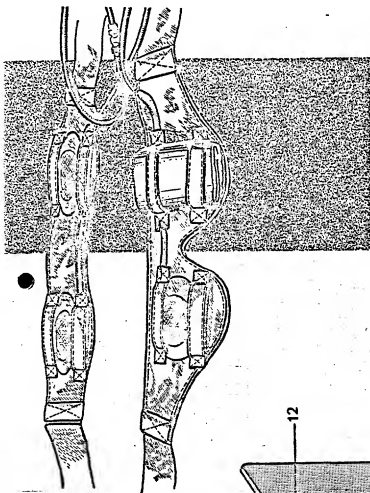
12) Transformator  
Transformer

13) Schuko-Gerätesteckdose  
Plug

14) Erdungsschraube  
Grounding bolt

15) Gedruckte Schaltung  
Wiring diagram

16) Skalenbeleuchtung  
Scale illumination




## THERAPIEZENTRUM

Neben den Forschungsstätten wird die Anlage einer therapeutischen Station von besonderem Wert sein. Derartige Therapiestationen können natürlich auch als selbständige Heilischlafstationen errichtet werden. Auf gleicher Grundfläche wie die Forschungsstätte aufgebaut, verbindet diese Anlage ideale Behandlungsvoraussetzungen mit dem Komfort eines Sanatoriums.

## THERAPEUTIC CENTER

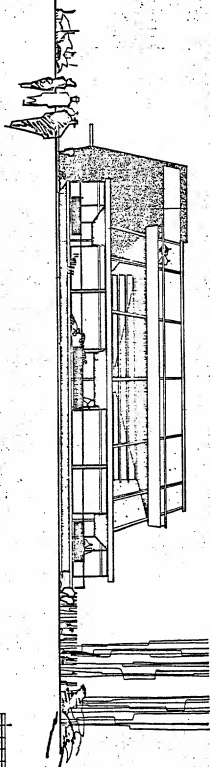A therapeutic center next to the research center will be of great value. Such therapeutic centers can also be erected as separate therapeutic sleep sanatoria. The basic layout is the same as the research center's, so that this arrangement provides ideal conditions for medical treatment combined with the comforts of a sanatorium.





SEITENANSICHT  
SIDE VIEW

Der Gang "g" verbindet von außen her einerseits die Räume mit den Schlaßkufen und ermöglicht andererseits die Räume für die Patienten mit stationärer Behandlung sowie die Arztbesprechungs- und Eingangshalle. Jeder der Räume für stationäre Behandlung "r" kann sowohl als Apparat- als auch als Laboratorium auszustatten. Natürlich besteht die Möglichkeit, einige dieser Räume als Laboratorien auszustatten. Von der Eingangshalle "e" ist die Dachfläche des Gebäudes erreichbar. Das Dach ist als LB-Kegelstegkonstruktion ausgebildet und ermöglicht eine weitgehend stützenfreie Konstruktion, wodurch die Flexibilität des Grundrisses erhalten ist. Es ist insbesondere auch von besonderem Reiz, die gepöbelte Form der Dachkonstruktion gleichzeitig als Schwimmbad für die Patienten auszunutzen.

The circular corridor (g) links the sleeping cells with the apartments and the sick rooms as well as with the rooms for research and medical inspection and the offices. All the rooms for stationary treatment (r) can be used as apartments or as sick rooms with several beds. There is also the possibility to use some of these rooms as laboratories. The roof with terraces and swimming pool can be reached from the lobby. It is an LB conical shell roof providing flexibility for the general layout due to its construction, which requires a minimum of support.

# LEGENDE: a) Eingangshalle mit Treppenaufgang zum

Lobby with staircase to the terrace and the swimming pool

b) Aufnahme

reception

c) Büro

Office

d) Untersuchungsraum

Medical inspection

e) Taktische

Küchen

f) Apartments, bzw. Krankenzimmer

Appartments, sick rooms or laboratories

g) Verbindungsang

Connecting corridor

h) Behandlungsraum mit Schlaßkufen

Room for therapeutic treatment with sleeping cells

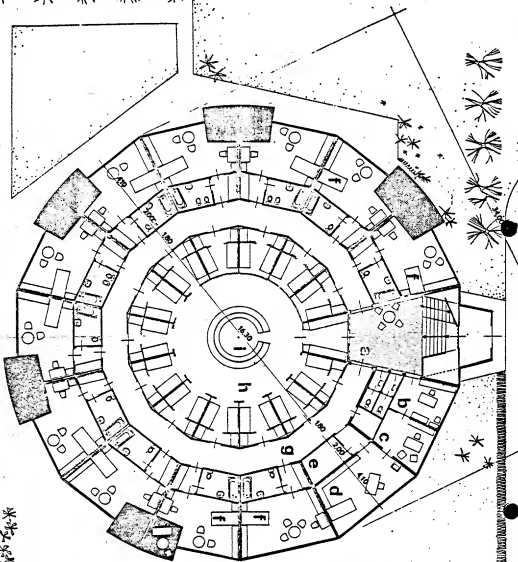
i) Zentraler Beobachtungs- und Schaltstand

Central control and switchboard

gang zum  
ence and the

inner  
laboratories

open  
at with  
Schichtend  
and



ERDGESCHOSS  
MAIN FLOOR



Die kreisförmige Liegeterrasse ist teilweise überdacht und es besteht die Möglichkeit, die Gesamtanlage winterfest zu verkleiden, wodurch der Bodeneinfrost das ganze Jahr hindurch aufrechterhalten werden könnte.

The circular terrace is partly covered. There is the possibility to cover the whole swimming pool, which would allow the plants to swim throughout the year.

LEGENDE: 1) Liegeterrasse

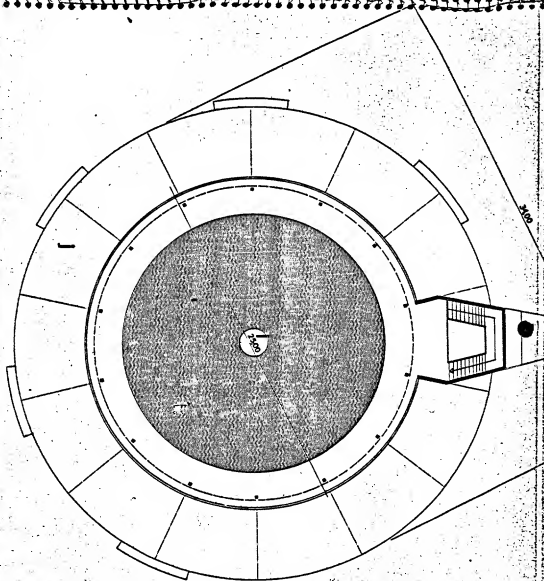
Terrace

2) Schwimmbecken

Swimming pool

3) Insel

Island box



SCHWIMMBAD  
SWIMMINGPOOL



Das LB-Dach und die tragenden Elemente sind als reine Stahlkonstruktion geplant. Die Decke über den Räumen "pp" wird als Stahlbetonkonstruktion zwischen Stahlträgern ausgeführt. Trenn- und Zwischenwände können sowohl in massiver als auch in leichter Bauweise mit flexiblen Wänden erstellt werden.

The LB roof and the supporting structure is a steel construction. The roof above the rooms (f) is a reinforced concrete structure. All the walls can be made interchangeable, depending on the general requirements.


# LEGENDE:

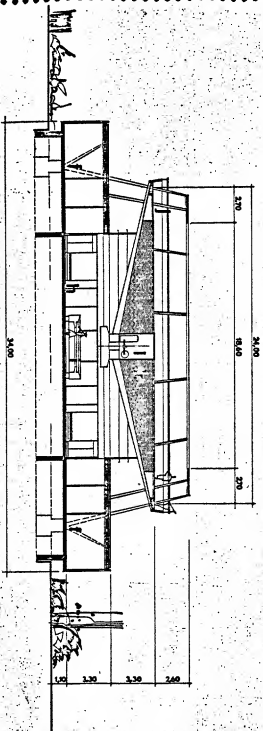- f) Appartment, bzw. Krankenzimmer  
Apartments or sick rooms
- h) Behandlungsräume  
Rooms for therapeutic treatment
- j) Zentraler Beobachtungs- und Schaltboard  
Central control and switchboard
- l) Liegeerosse  
Terrace
- k) Schwimmbecken  
Swimming pool
- i) Insel mit eingebauter Klimaanlage, Heiz- und Umwälzanlage  
Utility box (for condition, heating and water cleaner)

20 Zimmer

iment  
und Schallstend  
board

Wärmungs-  
anlage  
heating and




SCHNITT  
CROSS-SECTION

Das vorliegende Projekt zeigt den Prototyp der Anlage eines Heilchlozentrums, wobei natürlich die verschiedensten Vorleistungen in Hinblick auf Grundriss und Ausstattung möglich sind. Mit diesem Projekt soll den allgemeinen Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung und allen damit verbundenen heilenden Effekten Rechnung getragen werden. Ein großer Schritt vorwärts im Kampf gegen moderne Krankheiten!

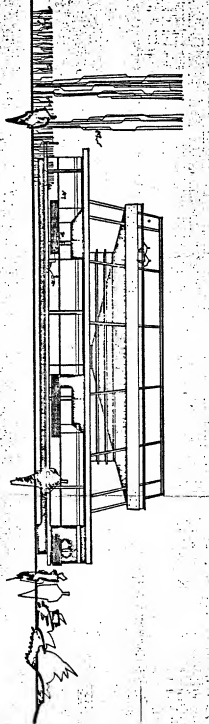This project presents the prototype of an electric sleep therapeutic center. All sorts of variations for the general layout and the equipment are provided. The project is a modern solution to meet the general need of relaxation and sleep and their curative effects. A big step forward in the fight against modern diseases!





SEITENANSICHT  
SIDE VIEW

## LITERATURHINWEISE

## LITERARY SOURCES

- ABDUMOVA, H.A.: Behandlung des Bettlaßens bei Kindern mittels Elektrochloaf.  
Gesamte wissenschaftliche Arbeiten (Fachcenter Med. Inst.) Band II, 1961, S. 101-105.
- AKERF, K.W., KOHILA, and HESS, R.Jr.: Sleep produced by electrical stimulation of the thalamus.  
Am.Journ.Physiol. 1952, 168:260-267.
- AKHROV, E., et al.: On sleep induced through electrical stimulation on dog thalamus.  
Polia psichiat.neurol. 1956, 10:117-146
- BASCHITSKIY, V.E. u. E.I. IBERDINSKAYA: Bedeutung des Elektrochloaf bei der Behandlung von Neurosen, traumatischen Affektionen und Gefäßserkrankungen des Gehirns in Verbindung mit dem Agrypnia-Syndrom. Arbeiten des I. Hochener Med. Inst. Band 25, 1963 Seite 395-398.  
Vor dem Text und im Inhaltverzeichnis 2. Autor: E.I. KULIKOVA (IBERDINSKAYA).  
Bibliographie.
- BOLOTOVA, Z.E. und G.S. KUDRAVZHEVA: Wirkung des Elektrochloaf auf die Dynamik der unbedingten Gefühlsreflexe bei der Behandlung von Neurosen.  
Aus: Das Gehirn und die Reflexsteuerung.  
Kiev, 1963, S. 93-95
- BUKALOV, Z.E., P.I. BUL und L.A. TSHEMERIKOVA: Zur Frage der Behandlung von Bronchialasthma mittels Elektrochloaf.  
Aus: Bronchialasthma, 3. Ausgabe Leningrad, 1962, S. 246-257
- BUKALOV, Z.E., P.I. BUL und L.A. TSHEMERIKOVA: Zur Frage der Elektrochloafbehandlung von Kranken mit Asthma

- DIEBARTH, H.B., F.H. WAGNER, St. SCHUT und R. GIESSEN: Stromfelder im Gehirn des Menschen während des Elektrochloaf (im Druck)
- DOSHAMADJAN, N.S. BANNIKOVA u. K.V. NIKOLAJEVA: Methode zur Behandlung von Elektrochloaf und Elektrochloaf.  
Material der 14. Konferenz der Physiologen aus d. Süden der UdSSR.  
Krasnodar, 1962 Seite 92-93.
- DULBERGER, L.H.: Kann klinischer Schlaf Zeit sparen?  
"Electron" 36 (1963) 21, 10-21
- DYMEKHA-KRIGEL, L.V.: Die klinische Therapie von Schlafstörungen mit Insulin und Elektrochloaf.  
Aus: 125 Jahre der Perner psychoneurologischen Klinik.  
Pernu, 1961, Seite 128-132
- PAVOLOV, E., G. LOEB, G.F. ROSSI and G. SACCO: EEG Synchronization and Behavior of Sleep Following Low Frequency Stimulation of the Brain Stem Reticular Formation.  
Archives Italiennes de Biologie, Vol. LXII, Fasc. 1, Jan. 1961
- Prolov F.F.: Funktionaler Zustand des Nervensystems bei einigen juckenden Dermatosen während der Elektrochloaftherapie.  
Wissenschaftliche Schriften des Wissenschaftlichen Goskij-Forschungsinstit. für Dermatologie und Venereologie Nr. 15321 und der Zentralbibliothek der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, 1961.  
Bibliographie
- GILJENOSKI W.A., R.N. LITWENKOV, SEGAL Ju. Je., KRITIKOVA: Elektrochloaf

- HODDY, J.B.: Die "Lage" Elektrochloaspe, "Med. Industrie 1957 Band 1, S. 95-97
- JABLONIK B.S.: RUPOVETZKID, L.D., BSAJMA L.D. u. KOZ J.J.: Therapie von juckenden Dermatosen mittels Elektrochloas. Die Wirkung des Elektrochloas auf den Grundstoffwechsel. Hagensnektion, wärmeregulierenden Reflex, Elektrochloas, der Haut und Kohlenhydratstoffwechsel. Arbeiten der 3. Unterabteilung der Dermat.-Venerolog. Leningrad, 1961, S. 203-206.
- JERZAKOW M. M. und andere: Elektrochloas und Hypnose in der Dermatologie. Moskau, Medgiz, 1963, 308 Seiten mit Illustrationen.
- JERZAKOW M. A. und TYUNG E. I.: Die Anwendung des Elektrochloas und des Medikamentenchloas in der komplexen Therapie von rheumatischen Affektionen des Nervensystems bei Kindern. Arbeiten des Jugendk. Med. Inst. Band 6, Fragen der Klinik, der Pathophysiologie und der Behandlung von psychischen Erkrankungen. 4. Auflage, 1963, S. 184 - 187.
- KLEINSORGE, H. ROSENER, K., DRESEMER, S.: Experimentelle Untersuchungen über den Elektrochloas. Arch. Physik. Therap. 9 1 : 20 - 24, 1957
- KOEPPEN S. und EICHLER R.: Die Elektrochloas. Elektrochloas, 1961 Nr. 2 (98 - 103)
- KOEPPEN S. und EICHLER R.: Der Elektrochloas. Elektrochloas 5, 1960, Nr. 1 (26 - 35)
- KOEPPEN S. und EICHLER R.: Untersuchungen über Elektrochloas in der inneren Medizin. Medizinische Klinik Jahrgang 58, Nr. 36, S. 1492 - 1495
- KONDRASCHENKO V. T.: Der Traum während des Elektrochloas. Pavlov-Zeitschrift der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften, Band 13, 1 Ausgabe, 1962, Seite 51-61. Resümee in englischer Sprache.
- KONOMALOVA N. Z.: Über die Behandlung von Phantomschmerzen mittels "Elektrochloas". Arbeiten des Inst. der experimentellen und klinischen Chirurgie. AN. KSSR Alma-Ata, 1961, Band 7, Seite 51 - 54.
- KOSSOWSKIJ L. W.: Elektrochloas bei der Behandlung des Glaukoms. Gesamte Arbeiten der Augenklinik des Gorkij-Med. Inst. Gorkij, 1960, Seite 40 - 46.
- KOMALOVA E. Ja.: Über die Wirksamkeit des Elektrochloas in der psychiatrischen Klinik. Arbeiten des I. Hoch-Med. Inst. Band 25, 1963, S. 407 - 411.
- KOSIK L. B.: Behandlung der Chorea minor bei Kindern mittels verlinkertes bedingt reflektorischen Schlaf und Elektrochloas. Korschak-Zeitschrift der Neuropathologie und Psychiatrie. Band 60, 7. Ausgabe, 1960, Seite 811 - 816.
- KOZ, I. I.: Grundstoffwechsel und funktionaler Zustand des Hagens bei Exzentrismen. Auswirkung des Elektrochloas auf Grundstoffwechsel und Exzentrismen. Dermatologie und der Venerologie. 2. Ausgabe Gießenburg 1962, Seite 21 - 28.
- LAMINA E. A.: Zur Frage der Anwendung des Elektrochloas in der Klinik für Innere Medizin. Gesamte wissenschaftliche Arbeiten des Voroness-Klinikoplas, Boroness, 1960 3. Ausgabe, Seite 119 - 120
- LIMBOU, S.: Production du sommeil et de l'anesthésie générale et locale par les courants électriques. Comptes Rendus des Séances, Académie des Sciences, 21 Juillet, 1902, 135 - 99.
- MAKSANOW M. P. und TROSCHEW W. D.: Unsere Erfahrungen mit der Elektrochloas. Elektrochloas, 1962, Seite 231-234.

ELASDNIKOVA I.W. und BLOCHILINA W.P.: Über die Anwendung des Elektroschlafes bei reaktiven Zuständen. Gemmelte Arbeiten des Dnjepetrowsker Med. Inst. und des Dnjepropetrowsker Klin. Metchnikow-Krankenhaus. Dnjepropetrowsk, 1960, Seite 453-455.

WAGNER, P. M., SCHUY, S. T., GENSER, R.:  
Potentialmessungen im Handelen während  
der Durchleitung mit Impulsstromen.  
Der Anaesthetist 13, Heft 11 (353-356) 1964

ROBINOVITCH, L.G.: *Sommeil électrique*.  
Nantes. 1906. A. Dugas and Cie. 98 pp.

**MAGENER, F.M. und HAFFNER H.: Elektrohelschlaf**  
(eine neue Therapieform)  
Der Anästhetist (im Druck)

Nantes, 1906. A. Dugas and Cie. 98 pp.

**ROTTERDAM S.:** Erfahrungen in der Behandlung der obliterierenden Endarteriitis mit dem Apparat "Elektrosen".  
 Neue chirurgische App. und Instruments,

MAGENHEIDER, F.M., JENKINS, F.L., HAYNER, H.: Zur Veränderung der cerebralen Haemodynamik während des Elektro-schlafes. Dtsch.med.Journ. (im Druck)

2. Auflage 1958, Seite 77-82.

Dtsch.-med. Journ. (1m Druck)

SENADZHI, G., TSCHICALOFF, H.: L'electro-sommeil  
(Der Elektroschlaf)  
Medicine et Hygiene 15 356:123, 1957

WISCHNIEWSKAJA E.S.: Über die Rolle des Reflexfaktors im Wirkungsmechanismus des Elektroschlafes. Arbeiten d. I. Moskauer Med. Inst. Band 25 1967 S. 43-700. 405

**SERGEJEV G.W.:** Erfahrungen in der Elektroschlafbehand

1965, Seite 399-400.  
Bibliographie.

von Hypertonie-Kranken.  
Aus dem Behandlungsinstitut der Akademie der  
sowjetischen Wissenschaften. Moskau.

WITOLINSCH A. und BUTZ A.: "Elektrosen" - ein neues Tridienhal-  
leiter-elektronengerät für die Neurotherapie.

**SCHACHKROMSKAJA E. I.:** Anwendung des Impulsstromes niedrigerer Frequenz zur Behandlung von

Nachrichten der Lettischen SSR Akad  
der Wissenschaften 1962. No. 1. Set

Frequenz bei der komplexen Interaktion von Phantomschmerzen.

110.  
Résumé in englischer Sprache.

Fragen der Balneologie, Psychotherapie und der Heilgymnastik. 1960, No.2, Seite 109-113  
Bibliographisch.

ZHELTAKOV, M.M., SKRIPKIN, Yu.K. and SOMOV, B.M.  
Methods used in administration of

SCHATROVA S.P.: Wirksamkeit der Elektroschlaftherapie bei

induced sleep.  
Elektrosan i Glipnoz v. Dermatologii.

einigen Berufskrankheiten. 1963,  
Arbeitshygiene und Berufskrankheiten.  
No.9, S.45-47.

Madgix, Moscow, 1964.

CHRISTEL, H. u. ORTAYER, W.: Anwendung von Reizströme

**Bibliographie**

**TURJEW A.A.:** Die Elektroschlafbehandlung von Patienten mit

Schlaftherapie:  
Dt.Ges.Wes.10(1955) 41, S.1334 - 1338

mit Ekzem und Neurodermitis.  
Moskau.

KRULL, G.: Ein Gerät für elektrisch induzierte Schläge  
Medizinarmarkt 6 (1958) 3, S. 74-75.

ULJANOW N.I. und KOLUPAJEW G.P.: Zur Frage über die Blutbildveränderung während des Elektroschlafes.

STRAUSS, B. et al. New York Med. College New York, N.Y.) p 514  
Electrical induction of sleep  
The American Journal of the Medical Sciences

bericht der experim. Biologie und Med. Band 43  
No. 5, 1960, Seite 51-54.  
Resumee in englischer Sprache.

THE AMERICAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCIENCES  
248 (1964) No. 5



1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.



**ANSATZ FÜR VERBENNUNGSMOTOREN**

ANSA F. K. E. H. K. 1111  
Stahlisch aufbereitete Versuchsmotoren  
Konstruktion und Versuch, Bau von Prototypen,  
sowie elektron. und mechan. Meßgeräten  
Kleiststraße 48a  
Graz / AUSTRIA  
Telefon: 94 171  
Telefax: 1379  
Telegramme: Profilit, Graz

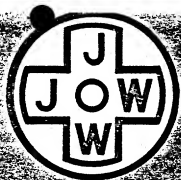
**J. ODEGA**  
Architekt-techn. Industrie, GmbH  
Gemeinbauergasse 11 (Ecke Kopfgasse 61)  
Wien XVI / AUSTRIA  
Postanschrift: Wien 107, Postfach 105  
Telefon: 22 16 01  
Telegramme: Medwood Wien



**blinder + co**

**BINDER & CO.**

Stahlbau, Förder- und Aufbereitungsanlagen  
Eisenstraße  
Gleisdorf / AUSTRIA  
Telefon: 0 31 12 / 21 36  
Telefax: 1531  
Telegramme: Stahlbinder Gleisdorf  
Büro:  
Lindengasse 37  
Wien VII / AUSTRIA  
Telefon: 93 42 76, 93 15 87  
Telefax: 2098  
Telegramme: Stahlbinder Wien



# ELEKTRODORM

FÜR DEN ELEKTROHEILSCHLAF

